

## Installation des USB - Locks für RxView | CAD + RxHighlight | CAD




### Wie gehen Sie vor?

Sie müssen zur Inbetriebnahme des USB-Locks einmalig einen Sentinel-Treiber installieren. Achten Sie darauf, dass der USB-Lock während der Treiber Installation **nicht** in einem Slot des PC/Laptop steckt. Vergewissern sie sich, dass Sie während Installation des Treibers und der Einbindung der Lizenzdatei Administratorrechte auf Ihrem PC haben.



Legen sie Ihre Installations-CD ein. Sie sehen den Setup-Dialog und klicken auf Anwendungen installieren.


Im nächsten Dialog klicken Sie auf Zubehör installieren.

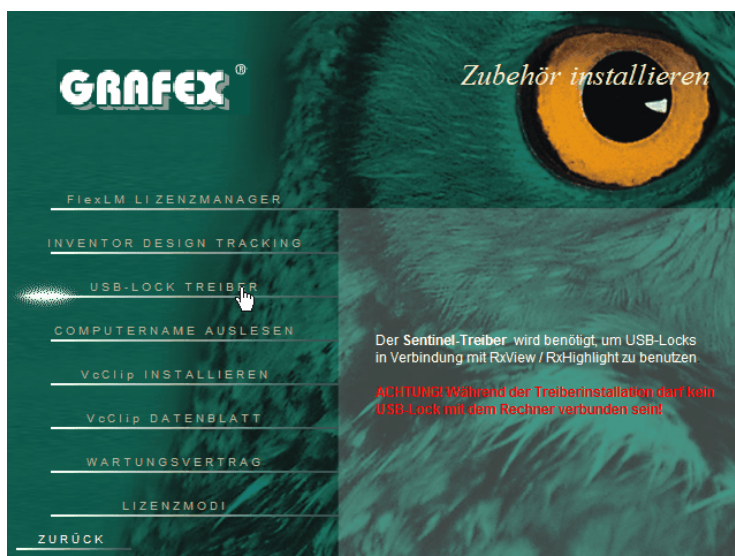

Im „Zubehör installieren“ - Dialog klicken Sie auf „USB-Lock-Treiber“.

Folgen Sie den Anweisungen des Sentinel-Driver-Setup Dialogs.

Damit ist die Installation des Sentinel-Treibers für den USB-Lock abgeschlossen, Sie können nun den USB-Lock in einen freien USB-Slot stecken.

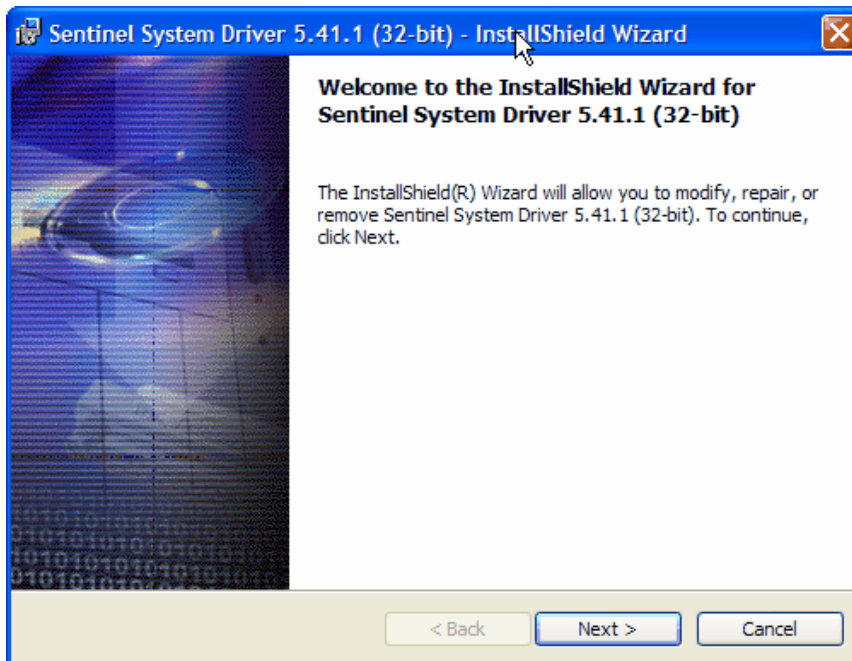

Die Lizenzdatei (\*.lic), die Sie von GRAFEX<sup>®</sup> erhalten haben, kopieren Sie in das Installationsverzeichnis von RxView | CAD + RxHighlight | CAD. Standardmäßig ist das c:\programme\rasterex\rxview\

Starten Sie nun RxView/ RxHighlight. Lesen Sie auch die Installationshinweise für RxView | CAD + RxHighlight | CAD.

Stand: 04.09.2007